

VerifyNow

Echipament pentru evaluarea răspunsului pacientului la medicația antiagregantă plachetară

Până la **33%** din pacienții aflați sub tratament NU beneficiază de efectele scontate ale medicației antiagregante plachetare.

VerifyNOW este primul sistem precis și rapid de monitorizare a răspunsului pacientului la inhibitori de P2Y12. Este un instrument ușor de utilizat destinat medicilor pentru adaptarea tratamentului fiecărui pacient.



Ușor de utilizat și interpretat rezultatele:

PASUL 1

Deschideți capacul și introduceți testul

PASUL 2



Introduceți proba de sânge

PASUL 3

Închideți capacul și citiți rezultatele (2-5 minute în funcție de tipul testului)


VerifyNow PRU Test

- Măsoară răspunsul pacientului la inhibitori de P2Y12 (clopidogrel, prasugrel, ticlopidina și ticagrelor)
- Rezultate cantitative exprimate în PRU (P2Y12 Reaction Units) și procent de inhibiție (%)
- Interpretare: interval terapeutic 95 – 208 PRU

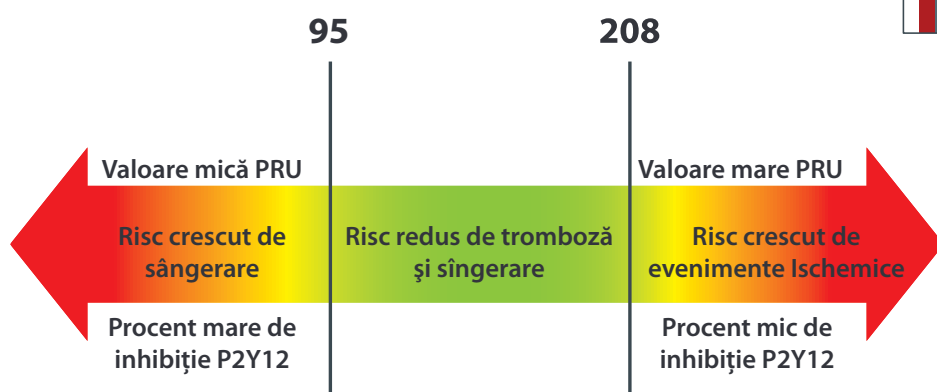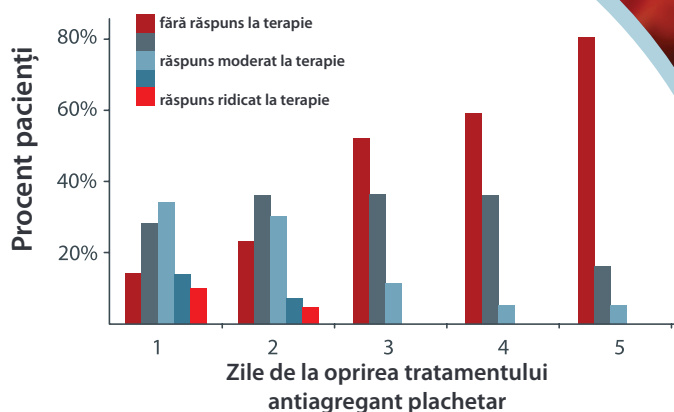

VerifyNow Aspirin Test

- Măsoară răspunsul pacientului la aspirină
- Rezultate cantitative exprimate în ARU (Aspirin Reaction Units)
- Domeniul de măsurare: 350 – 700 ARU
- Interpretare: 550 ARU valoarea de cut-off

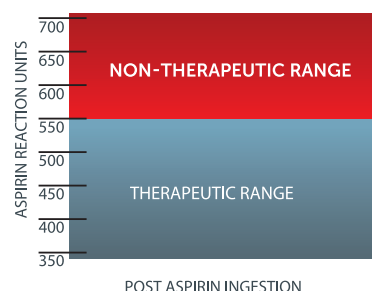

VerifyNow IIb/IIIa Test

- Măsoară răspunsul pacientului la inhibitori de GP IIb/IIIa (ex: ReoPro® și Integrilin®)
- Rezultate cantitative exprimate în PAU (Platelet Aggregation Units) și procent de inhibiție (%)
- Domeniul de măsurare: 0 – 330 PAU